

～二次感染リスク低減～

## 陰圧装置

SKM-1000AC


HEPAフィルターにより清浄空気を室外に排出し陰圧にします。

- 52m<sup>3</sup>を1時間当あたり12回換気
- 調整ボリュームにて風量を調整
- 循環式の空気清浄機へ切替可能
- 殺菌ランプにより機器内部殺菌



### 設置例

室内の空気を外部にHEPAフィルターを通し排出。廊下との差圧により漏洩を防ぐ。

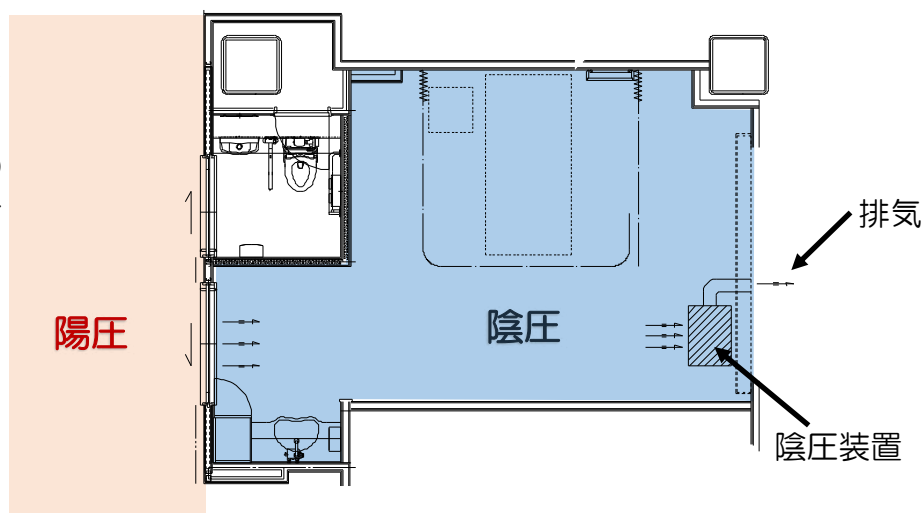

## 操作パネル



## 仕様

外 寸	W700×D500×H1700
設計陰圧	2.5Pa
フィルター	抗菌プレフィルター 抗菌HEPAフィルター
殺菌灯	15W 2本
換気能力	52m <sup>3</sup> にて12回/時 (MAX)
処理風量	10.3m <sup>3</sup> /min
騒 音	50dB (2.5Pa時)
定格電源	AC100V 3.5A

販売業者



**オリオン・ラドセーフメディカル株式会社**

URL <http://www.orrad.co.jp>

名古屋本社 名古屋市中区栄五丁目8番24号  
TEL: 052-261-0706 FAX: 052-261-0798

東京本社 東京都品川区西五反田二丁目12番19号  
五反田NNビル  
TEL: 03-5759-6011 FAX: 03-5759-6022

京都支店 京都市上京区日暮通下立売上る天秤町590  
TEL: 075-811-4669 FAX: 075-841-4021

金沢営業所 金沢市乙丸町甲165  
TEL: 076-252-5999 FAX: 076-252-2946

松本営業所 松本市寿北一丁目12番18号  
オフィス・ナガサワ2階B号  
TEL: 0263-26-5626 FAX: 0263-26-5444

テクニカルセンター 埼玉県三郷市早稲田五丁目18番18号  
TEL: 048-959-4880 FAX: 048-959-4884

製造販売業者



**美和医療電機株式会社**

愛知県あま市花正郷中25番地

TEL (052)441-7161 FAX (052)443-2031